



アルカリ単三形(LR6G)
LR6G/2VB
2個入りパック
オープン価格※
1.5 V



単三
R6NC/4SK
4個入りパック
オープン価格※
1.5 V



空気電池
PR44
6個入りパック
希望小売価格
1,575円
1.4 V



空気電池
PR48
6個入りパック
希望小売価格
1,260円
1.4 V



空気電池
PR41
6個入りパック
希望小売価格
1,260円
1.4 V



空気電池
PR536
6個入りパック
希望小売価格
1,575円
1.4 V

上記電池の希望小売価格には消費税が含まれています。記載内容は2012年11月現在のものです。※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

聞こえのお役立ち情報、満載! パナソニック 補聴器 ホームページ

詳しくはパナソニックホームページで
パソコン
panasonic.biz/healthcare/phchi/

◎ホームページの内容及びデザインは予告なく変更する場合があります。

オーダーメイド補聴器

オーダーメイド補聴器の形が耳に合わない場合、形状の作り替えを無料で行います。(購入後120日以内)

補聴器をお買い上げになる前に、次のような経験をお持ちの方は、耳鼻咽喉科医に、補聴器使用についてご相談ください。

- 1.耳だれ、耳の痛み、めまい、耳鳴りなどの自覚症状がある。
- 2.耳が急激に変化した。
- 3.過去に耳の手術をしたことがある。
- 4.耳あかが大量に出る、またはそのような体質である。

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙、騒音の多い場所でのご使用、また耳の近くで突然大きな音を出すことはおやめください。補聴器の故障や耳に悪影響を及ぼす場合があります。

愛情点検 定期的に販売店に点検をご依頼ください。



こんな症状はありませんか

- 電源プラグが異常に熱い。
 - 煙が出たり、異常ににおいや音がする。
 - 水や異物が入った。
 - その他の異常や故障がある。
 - 補聴器イヤチップに耳あかがつまっていますか。
 - 耳かけ型補聴器のチューブに水滴がたまっていますか。
- ▶ このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源をオフした後電池を取り出し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

保証書に関するお問い合わせ

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入日の記載のないものは無効となります。

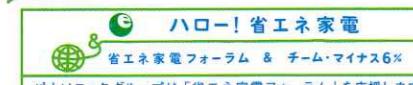
・補聴器の補修用性能部品の保有期間は製造打切後7年です。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に表示されている製造番号と保証書記載の製造番号が一致しているかお確かめください。

その他使用上の注意

①適切な音量でご使用ください。②WH-B500、B400は携帯電話やPHSと共にしないでください。③使用しないときは、スイッチを切りましょう。

eco ideas

パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます 詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco



材料のエコ

パナソニック製品は、特定の環境負荷物質*の使用を規制するRoHS指令にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

ISO 14001

世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。

情報セキュリティ

ISO27001

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格である ISO27001 を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社の ISO27001 認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

365日、いつもあなた。

パナソニック 補聴器相談センター (受付9時~20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいているお問い合わせ、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



0120-045285
携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック エイジフリー介護チェーン

柏中央

〒277-0831 千葉県柏市根戸1790-1

電話 04-7128-4531 FAX 04-7128-4532

株式会社 ボウサイ東葛介護ショッピング

パナソニック補聴器株式会社
〒224-8539 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町600番地
TEL(045) 939-1835(代表) FAX(045) 939-1408

このカタログの内容についてのお問い合わせは、左記の販売店をご相談ください。

または、パナソニック 補聴器相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は
2012年11月現在のものです。

HI-107

●製品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

Panasonic

ideas for life

2012/VOL.3

補聴器
総合カタログ



補聴器 耳より情報公開中 panasonic.biz/healthcare/phchi/

人と人をつなぐ

パナソニックの補聴器



本カタログ掲載商品の価格には、配送、使用済みの商品の引き取り費等は含まれておりません。

あなたの日々の暮らしの中で、一番いい補聴器でありたい。

対話を重ねてあなたに理想の「聞こえ」をご提案する、それがパナソニックの願いです。

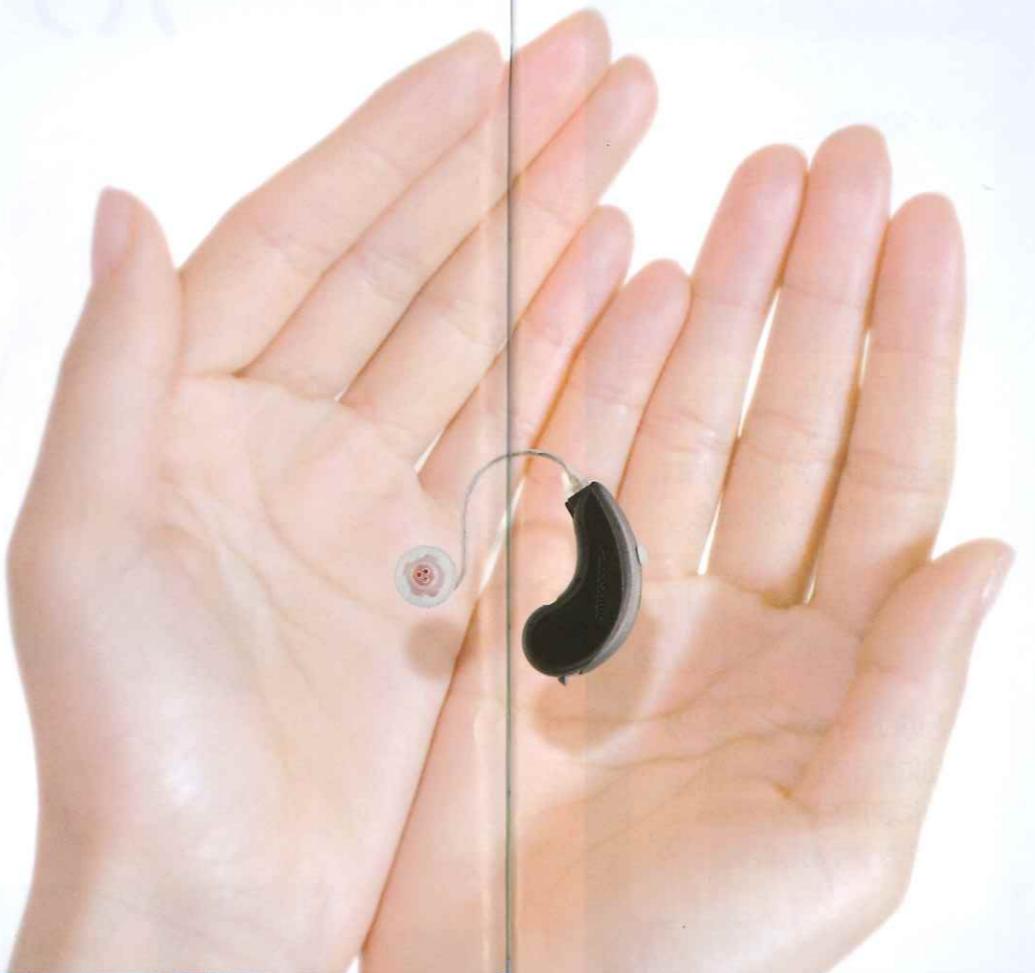


人と逢うのが待ち遠しい



車の音に気づき、外出の安心感がちがう

はじめませんか、
生き生きとした 音のある暮らし。



家族と同じ音量でテレビが楽しめる



座る位置を気にせず、会議も積極的に

Q なぜ 聞き取りにくくなるのですか？

A 原因は大きく分けて3つあります。

伝音性難聴
鼓膜の損傷や中耳炎の後遺症などで音が伝わりにくくなることによる難聴です。医学的に治療できる可能性があります。

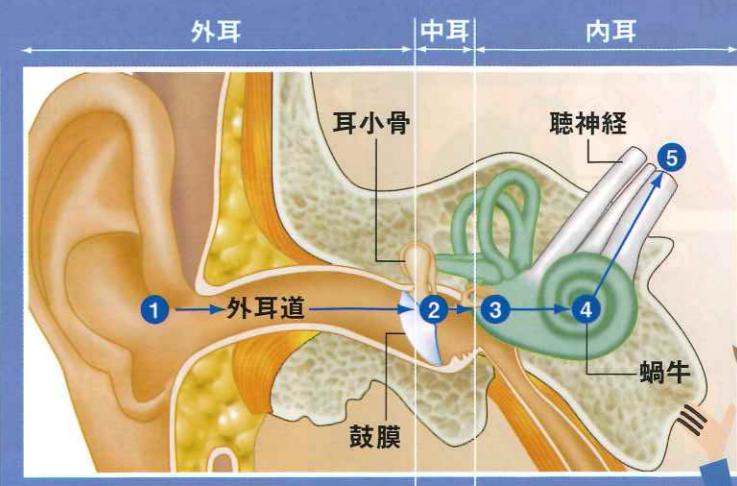
感音性難聴
老化による衰えなどにより、感覚器に障害がある場合に起こる難聴です。補聴器の使用で聞こえが改善する可能性があります。

混合性難聴
伝音性難聴と感音性難聴の両方の特徴を併せ持った難聴です。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめいたします。

注意: 聞こえの状態はお一人おひとり異なります。耳鼻咽喉科医の診察をお受けになることをおすすめします。

■ 聞こえのしくみ

- ① 空気を伝わって音の波が外耳道に入る
- ② 鼓膜が音の波によって振動する
- ③ 鼓膜の振動が内耳に伝わる
- ④ 聴神経を通じ、信号が脳に伝わる
- ⑤ 音（言葉）として認識される



伝音性難聴

感音性難聴

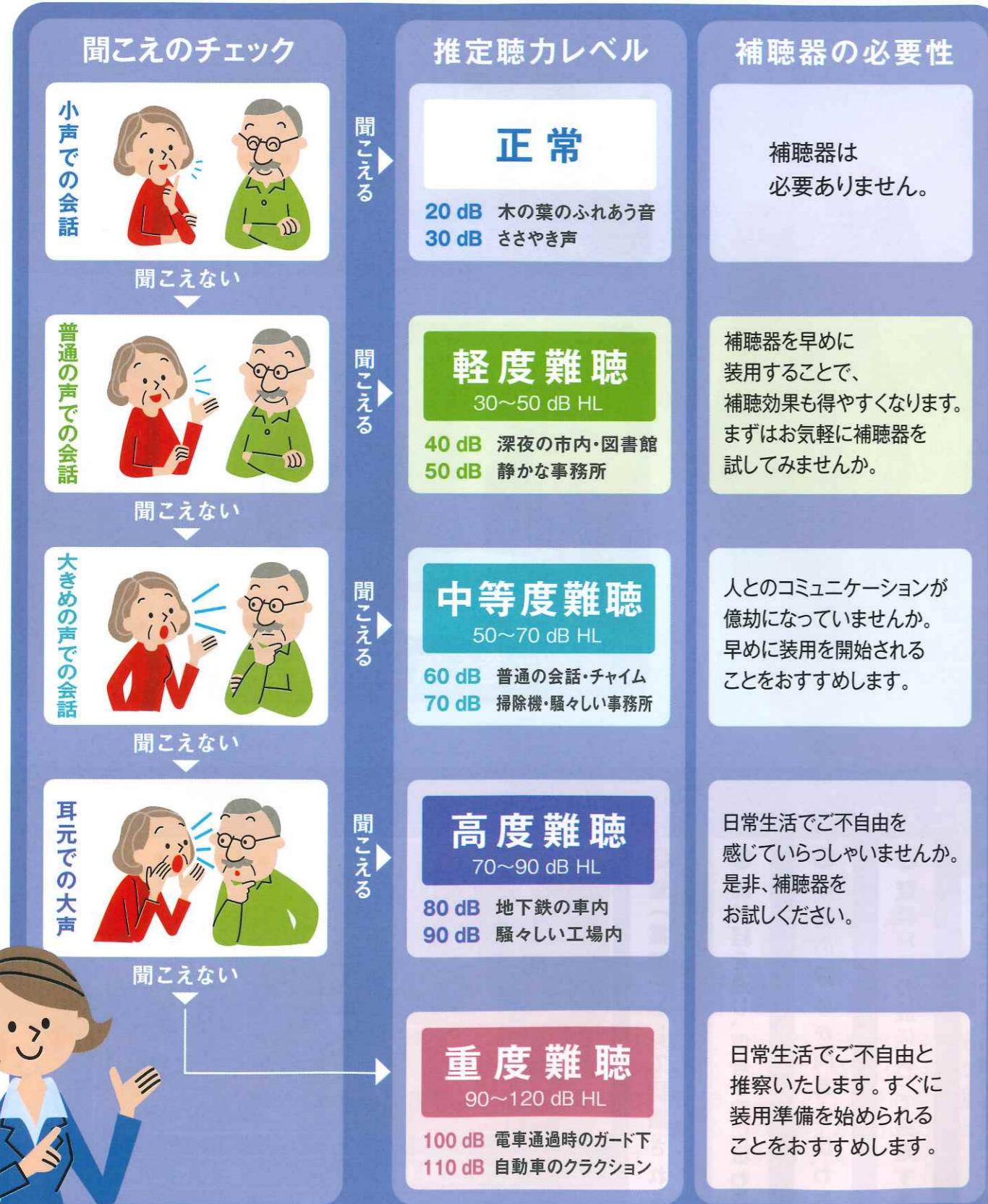
混合性難聴



まずはご自分の「聞こえ」を知ることから、はじめましょう。

Q どのくらい聞こえているのか、よく分からぬのですが？

A 普段の生活を振り返り、チェックしてみましょう。



出典：東京都環境局

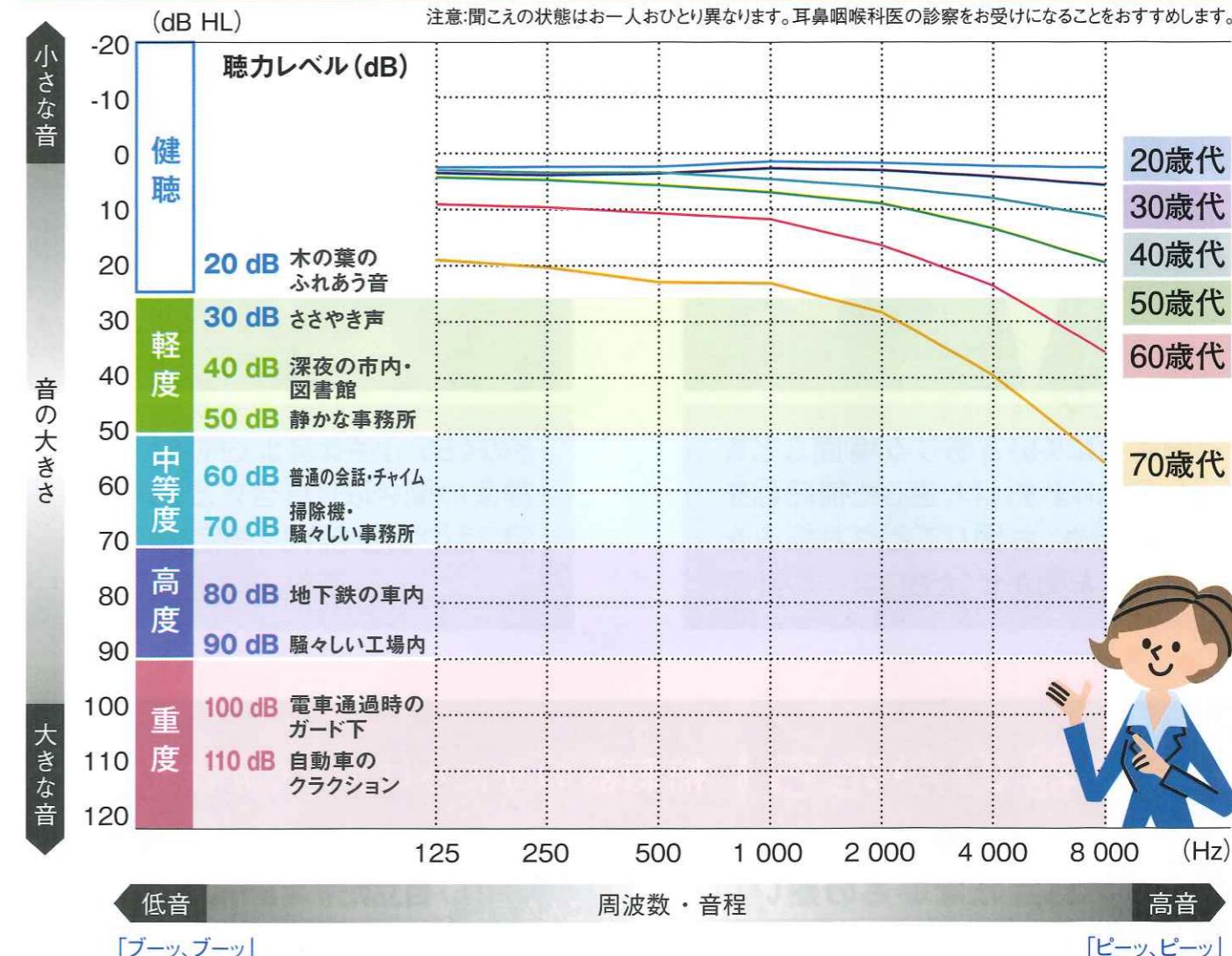
Q 聞き取りにくくなるのは、誰にでもあることでしょうか？

A 聴力は40歳前後から、弱まるとと言われています。聞こえの変化は、どなたにでも起こり得ることです。



参考文献：「よくわかる難聴」
出版社：金原出版
著者：立木孝先生

加齢に伴う聴力変化



コメント

販売店からのご提案
あなたにおすすめの補聴器は？
WH- (本カタログP. __)
WH- (本カタログP. __)

納得のいくまで、ご自分に合った補聴器をお選びください。

Q 補聴器って、お店に行けばすぐ購入できるのですか？



1 カウンセリング



聞こえにくいと感じる場面などを
お尋ねします。より適した補聴器を
選ぶため、お困りごとやお悩みを
率直にお聞かせください。

2 聴力測定



どのくらい小さな音まで聞こえるか、
言葉の聞き取り具合はどうかなど、
聞こえの状態を詳しく測定します。

A 長く使い続けられるように、専門スタッフといっしょに、
時間をかけてお選びください。



3 測定結果の説明



聴力レベルをもとに聞こえの状態を
ご説明します。ご自分の聞こえの
状態をきちんと知っていただくことが
大切だと考えています。

4 補聴器選び



聞こえのレベル、ご希望やご予算に
合わせて、さまざまな機種の中から
あなたにより適した補聴器を
ご提案します。

|補聴器のかたち| 補聴器のかたちは大きく分けて4タイプ。

こんな方におすすめ

目立たないものがいい
耳の形にピッタリ合わせたい
汗をかきやすい



こんな方におすすめ

目立たずオシャレなものがいい
テレビを楽しみたい
電池交換やお手入れのしやすいものがいい



聞こえのレベルや好みにあった補聴器をお選びいただけます。

こんな方におすすめ

扱いやすいものがいい
テレビを楽しみたい
高度難聴の方（軽～高）



こんな方におすすめ

操作しやすいものがいい
気軽に使えるものがいい
高度難聴の方（軽～高）



調整を重ねてお引き渡し。そこからが、本当のお付き合いです。

Q 選んだ補聴器は、すぐに使えるのですか？



5 試聴



補聴器を実際に装用してつけ心地、音の大きさ、ピーピー音がないか、ご自身の声の違和感、周囲の雑音の違和感などをご確認いただきます。

6 初期調整・ご購入



同じ機種の補聴器でも、お一人おひとりの調整は異なります。あなたにより適した状態に調整してからご購入いただきます。

A お一人おひとりの聞こえに合わせて調整が必要です。実際に補聴器を装用いただき、より適した状態に調整してお引渡します。

7 再調整



日常生活の中で、お気づきになる点があるかもしれません。ご希望に応じて再調整いたしますので、お気軽にご来店ください。

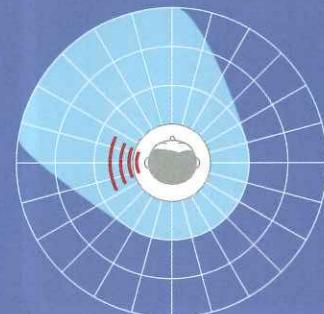
8 定期点検




ご購入後は、電池交換、音質調整、掃除などが必要になります。より快適に長くお使いいただけるよう、お手入れいたします。

より自然な聞こえには
両耳装用をおすすめします。

メガネも片側だけでは上手く機能しないように、補聴器も両耳装用がおすすめ。片耳に比べて、聞こえの機能をより引き出すことができます。



片耳(左耳)
装用時の
聞こえイメージ

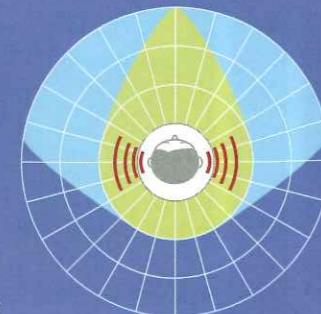

両耳装用時の
聞こえイメージ

両耳で
聞くから

音の臨場感が
ちがう



音を立体的にとらえることができ、より自然で臨場感豊かな世界が広がります。

騒音下でも
会話しやすい



雜踏での会話、銀行や病院で呼ばれる時など、騒がしい場所でもより聞き取りやすくなります。

耳への負担、
ストレスを低減



片耳装用に比べて補聴器の音量を上げなくても聞きやすく、疲れにくくなります。

車の接近も
わかりやすい



音の方向感や距離感がつかみやすいので、車の接近などもわかりやすくなります。

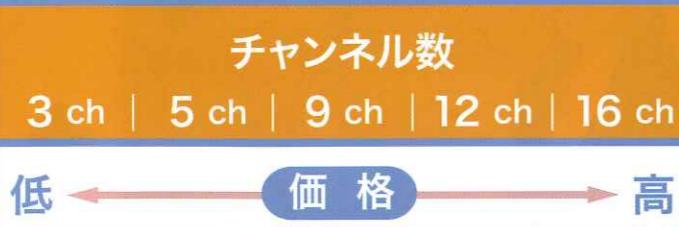
より良い補聴器選びのために
よくいただく述問にお答えします。

Q 価格に差があるけれど、どこが違うのですか？

A 聞こえに合わせて細かく調整できるほど、
また自動音量調節など機能が充実するほど、高価になります。



補聴器は、聞き取りに必要な音の周波数（音程）をチャンネルという単位に区切って処理します。チャンネル数が多いほどきめ細かく「聞こえ」に合わせることができ、価格も高くなります。



音質や音量を自動で調節するなど、面倒な操作を減らす機能が充実しているほど高価になります。



周囲の環境に合わせて「聞こえ」を自動調節

Q デジタル補聴器の特長はなんですか？

A きめ細かく音質を調整できるので、
お一人おひとりの「聞こえ」に合わせやすくなります。



デジタル
補聴器

- 音をきめ細かく分析し、雑音を抑え会話を聞き取りやすく強調するので、雑音の中でも会話がより聞き取りやすい。
- 不快なピーピー音（ハウリング）を自動で抑えるので、より使いやすい。
- 周囲の環境に応じて音量・音質を自動で調節するので、「聞こえ」がより快適。

お一人おひとりにご満足いただくこと。
パナソニック補聴器の願いは、ただそれだけです。

暮らしを見つめた
使いやすさ



小さな電池の取扱いをラクにするなど、
便利な機能で暮らしを支えます。

より自然な
聞こえ



風雑音や不快なピーピー音もカット。
より快適な聞き取りを実現します。

見せたくなる
美しさ



誰かに会いたくなるほどスタイリッシュな
デザインで、行動的な毎日が始まります。

パナソニック
補聴器
ラインナップ



オーダーメイド
耳あなタイプ
モデルC1シリーズ



耳かけタイプ
モデルB1シリーズ



ポケットタイプ
モデル105JJ



ポケットタイプ
モデル103JJ



RICタイプ
モデルR1シリーズ



つながるリモコン



電池保管・交換ツール
「くるポン」



リモコン

●補聴器は薬事法にもとづく管理医療機器です。補聴器の装用効果は、適切なカウンセリングにもとづく機種の選択と、お客様おひとりの聞こえの状況に合わせた音調整(フィッティング)により、その効果が発揮されます。●当社補聴器のご購入の際には、販売店での聞こえのご相談と、補聴器の適切なフィッティング調整をお受けいただき、ご使用されますようお願いいたします。当社希望小売価格には、販売店でのカウンセリング、フィッティング等の価格が含まれております。●当社の考える自然な聞こえとは、聞こえを補うことによって健聴者に近い聞こえの状態に近づけることと定義しています。●耳の健康を保つため、定期的な耳鼻咽喉科の受診をおおすすめします。

暮らしを見つめた使いやすさ

ご購入いただいた補聴器を、毎日使っていただきたい。いつでも、誰もがよりカンタンに使える。パナソニックは、人にやさしいモノづくりを目指します。

テレビや携帯電話が
よりキレイに聞こえる

「つながるリモコン」
「リモコン」

モデルR1シリーズ
WH-R17C/D, R15C/D, R13C/D
モデルB1シリーズ
WH-B17C, B15C, B13C

面倒な操作が少なく
より聞き取りやすい

「おまかせシーンセレクト」機能

モデルR1シリーズ
WH-R17C/D, R15C/D
モデルB1シリーズ
WH-B17C, B15C
モデルC1シリーズ
WH-M17A, M15A, WH-C17A, C15A, WH-F17A, F15A

小さな電池が
取扱いやすく
しかも長寿命

電池保管・交換ツール「くるポン」

モデルR1シリーズ
WH-R17C/D, R15C/D, R13C/D

電池放電防止機能「くるポンプラス」

モデルB1シリーズ
WH-B17C, B15C, B13C/A

「つながるリモコン」 補聴器が「無線ヘッドホン」に早変わり!



「ボイスメモ」機能

大切な言葉を記録します。

利用件数は2分40秒/回、5回可能

会話を録音

- 薬の服用方法を記録する。
- 道案内や乗換方法を記録する。
- 約束や連絡事項を記録する。
- お孫さんや家族との大切な会話を記録する。

テレビを録音

- 料理番組のレシピを記録する。
- お孫さんや家族との大切な会話を記録する。



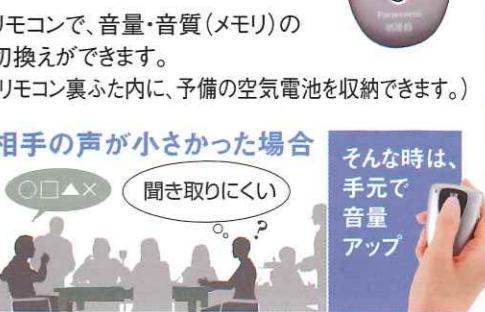
電話を録音

- 連絡先などを記録する。



「リモコン」

好みの音量に手元で
調節できます。



周囲の環境に合わせて補聴器が自動で「聞こえ」を調節します。



「聞こえ」を自動調節



静かな場所



静かな場所
での会話



騒がしい場所
での会話



風が強い場所
での会話



音楽

大切な操作が少なく
より聞き取りやすい

大切だけど面倒な
おやすみ前の
お手入れ。

モデルR1・B1シリーズ以外の場合

補聴器は湿気が大敵。
故障を防ぐためにも、
乾燥ケースでの保管が必要です。

モデルR1・B1シリーズの場合

「くるポン」、「くるポン
プラス」なら、
電池を外さずに乾燥ケース
で保管できます。



空気電池は乾燥が大敵。

乾燥ケースに入れる前に補聴器から
取り外す必要があります。



ECO 電池1粒で約1ヶ月の長寿命
環境にもお財布にもやさしい。

1粒(PR48)で
約300時間※1

電池寿命(時間)

モデル R1 シリーズ	スタンダード PR48	約300時間
パワータイプ	PR48	約250時間
B17C/B15C/B13C	PR48	約235時間
B13A	PR48	約300時間
CIC(ミニ)	PR536	約135時間
モデル C1 シリーズ	ITC(カナル) PR48	約390時間
	PR41	約230時間
ITE(コンチャ)	PR48	約325時間

※1 モデルR1シリーズ スタンダードもしくは、モデルB1シリーズ B13Aの場合

●電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。

世界でたったひとつのオーダーメイド

こんな方に
おすすめ

目立たないものが欲しい方に
耳あなに入るので見えにくい

耳の形にピッタリ合わせたい方に
はずれにくいからお出かけにも安心

汗をかきやすい方に
耳かけ型に比べて汗によるトラブルが少ない

お一人おひとりの耳の形に
合わせてお作りします。

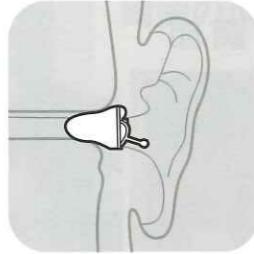
耳あなにフィットする、より自然な着け心地



CIC(ミニ)
Complete in Canal



小型だから耳にすっぽり隠れて
目立ちにくい




PR41 PR48 OK 2年間保証 メモリ
適応難聴度
軽 中 高 重
~70 dB HL

WH-M17A
希望小売価格
370,000円(電池付)

ITC(カナル)
In the Canal



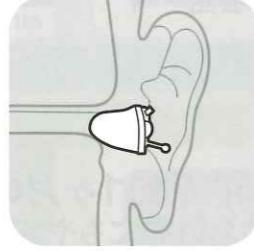軽度～高度まで幅広く対応できる




PR41 PR48 OK 2年間保証 メモリ
どれかひとつ
(OK on/off on/off)
適応難聴度
軽 中 高 重
~80 dB HL

WH-C17A
希望小売価格
370,000円(電池付)

ITE(コンチャ)
In the Ear



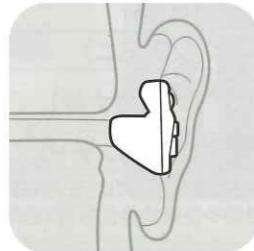高度難聴の方におすすめな
高出力コンチャ



PR48 OK 2年間保証 メモリ
どれかひとつ
(OK on/off on/off)
適応難聴度
軽 中 高 重
50～85 dB HL

WH-F17A
希望小売価格
370,000円(電池付)

騒がしい場面にも自動適応できる プレステージ	アクティブなスタイルにも合わせやすい ハイスペック	日常生活をカバーする スタンダード	機能 (P.22 参照)
チャンネル数 16ch	チャンネル数 12ch	チャンネル数 9ch	
おまかせシーン 6	おまかせシーン 6	おまかせシーン —	
メモリ数 ※2 4	メモリ数 ※2 4	メモリ数 ※2 3	
小さな音の強調 ○	小さな音の強調 ○	小さな音の強調 ○	
環境騒音抑制 ◎	環境騒音抑制 ○	環境騒音抑制 △	

WH-M17A 希望小売価格 370,000円 (電池付)	WH-M15A 希望小売価格 260,000円 (電池付)	WH-M13A 希望小売価格 180,000円 (電池付)	※3 シーケンセレクト機能
WH-C17A 希望小売価格 370,000円 (電池付)	WH-C15A 希望小売価格 260,000円 (電池付)	WH-C13A 希望小売価格 180,000円 (電池付)	※4 風切り音抑制(IWS)
WH-F17A 希望小売価格 370,000円 (電池付)	WH-F15A 希望小売価格 260,000円 (電池付)	WH-F13A 希望小売価格 190,000円 (電池付)	※5 前方強調(環境適応型指向性)
			※6 環境騒音抑制
			※7 ビーピー音抑制(ハウリング抑制)
			※8 ボリュームスイッチ
			※9 On/Offスイッチ

WH-F17A 希望小売価格 370,000円 (電池付)	WH-F15A 希望小売価格 260,000円 (電池付)	WH-F13A 希望小売価格 190,000円 (電池付)	※10 衝撃音抑制(AGC)
			※11 電池切れお知らせアラーム音
			※12 小さな音の強調



耳あなタイプ

モデルC1シリーズ

お客様の要望に
あわせてきめ細かく応える
豊富なオプション

マイク数※6

2つのマイクで聞きたい音にフォーカスする指向性機能か、本体をより小さく作成できる1マイクをお選びいただけます。



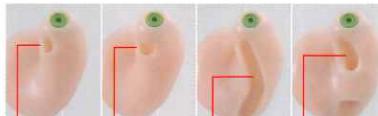
電池の種類※7

ITC(カナル)は、サイズが大きめ電池寿命がより長い電池(PR48)をお選びいただけます。電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定により変わります。



ベント(通気孔)の種類

自分の声の響きを軽減するベント(通気孔)を複数の種類からお選びいただけます。ただし耳あなたの大きさ、聴力レベルによってはお選びいただけない場合があります。



電源スイッチの種類※8

電源の入り切りだけでなく、耳元で音量を調節できる便利なボリュームスイッチか、操作が簡単なレバー式の電源スイッチをお選びいただけます。



メモリ切換えスイッチ※9

好みに合わせて音質設定を切換えるメモリ切換えスイッチを付けることができます。



※6 1マイク仕様はWH-C17A,C15A,C13Aのみお選びいただけます。

※7 PR48をお選びいただいた場合は、電源スイッチ無し・メモリ切換えスイッチ有りの1マイク仕様となります。

※8、※9 WH-M17A,M15A,M13Aを除く

※1 お一人おひとりの耳に合わせて作りますので、形状や部品配置が写真と異なる場合があります。

※2、※4、※5 WH-M17A,M15A,M13Aを除く

上記の補聴器は非課税です。上記補聴器の価格は本体1台の希望小売価格です。記載内容は2012年11月現在のものです。

見せたくなる美しさ

こんな方に
おすすめ

目立たずオシャレなものがいい方に

小型でより目立ちにくい、カラーバリエーションも豊富

テレビを楽しみたい方に

「つながるリモコン」でより高音質に

電池交換やお手入れのしやすいものがいい方に

電池保管・交換ツール「くるポン」で面倒な電池のお手入れもより簡単

便利な暮らしがますます広がる
「つながるリモコン」「リモコン」



電池保管・交換ツール「くるポン」

「くるポン」に補聴器をセットするだけ。
電池を外さずに乾燥ケースで保管できます。



耳にフィットするやさしいフォルム



適応難聴度 ~75 dB HL

軽 中 高 重

イヤホンユニット

スタンダード

50~85 dB HL

軽 中 高 重

イヤホンユニット

パワータイプ

選べる8色のカラーバリエーション ^{*1 *2}



美しい日本を愉しむための「漆調」新色登場



*1 写真は右耳用です。 *2 キャリングケース(シルバー)が付属します。



お好きなケースをお選びいただけます。

ECO
電池長寿命

つながるリモコン/リモコン	WH-R17C/D, R15C/D, R13C/D
おまかせシーンセレクト	WH-R17C/D, R15C/D
電池保管・交換ツール「くるポン」	WH-R17C/D, R15C/D, R13C/D



RICタイプ
モデルR1シリーズ

使いやすさ

耳あなタイプ

RICタイプ

耳かけタイプ

風切り音抑制 (IWS)

前方強調 (環境適応型指向性)

環境騒音抑制

ピーピー音抑制 (ハウリング抑制)

衝撃音抑制 (AGC)

電池切れお知らせアラーム音

小さな音の強調

メモリ切換え両耳連携

※3,※4 WH-R13C/Dを除く

騒がしい場面にも自動適応できる プレステージ	アクティブなスタイルにも合わせやすい ハイスペック	日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数 16ch	チャンネル数 12ch	チャンネル数 9ch
おまかせシーン 6	おまかせシーン 6	おまかせシーン —
メモリ数 4	メモリ数 4	メモリ数 3
メモリ切換え両耳連携 <input type="radio"/>	メモリ切換え両耳連携 <input type="radio"/>	メモリ切換え両耳連携 —
小さな音の強調 <input type="radio"/>	小さな音の強調 <input type="radio"/>	小さな音の強調 <input type="radio"/>
環境騒音抑制 <input type="radio"/>	環境騒音抑制 <input type="radio"/>	環境騒音抑制 <input type="triangle"/>

WH-R17C

スタンダード

希望小売価格
355,000円(電池付)

WH-R17D

パワータイプ

希望小売価格
365,000円(電池付)

WH-R15C

スタンダード

希望小売価格
275,000円(電池付)

WH-R15D

パワータイプ

希望小売価格
285,000円(電池付)

WH-R13C

スタンダード

希望小売価格
175,000円(電池付)

WH-R13D

パワータイプ

希望小売価格
185,000円(電池付)

WH-R17C

スタンダード

希望小売価格
365,000円(電池付)

WH-R17D

パワータイプ

希望小売価格
375,000円(電池付)

WH-R15C

スタンダード

希望小売価格
285,000円(電池付)

WH-R15D

パワータイプ

希望小売価格
295,000円(電池付)

WH-R13C

スタンダード

希望小売価格
185,000円(電池付)

WH-R13D

パワータイプ

希望小売価格
195,000円(電池付)

上記の補聴器は非課税です。上記補聴器の価格は本体1台の希望小売価格です。記載内容は2012年11月現在のものです。

16

扱いやすく操作もラクラク

こんな方に
おすすめ

扱いやすいものがいい方に

電池放電防止機能「くるポンプラス」で面倒な電池のお手入れも簡単

テレビを楽しみたい方に

「つながるリモコン」でより高音質に

高度難聴の方に

高度難聴までカバーする高出力

便利な暮らしがますます広がる
「つながるリモコン」「リモコン」



電池放電防止機能「くるポンプラス」

電源を「切」にして、「ポン」と乾燥ケースに入れるだけ。
電池を外さずに乾燥ケースで保管できます。



髪色や肌の色に合わせて選べる目立たにくい3色



ローズグレー(-H)



ブラウン(-T)



ブラック(-K)

シーソー式ボリュームで使いやすい

髪の毛や顔を触った時など、耳に掛けた状態でも誤操作しにくい
シーソー式ボリュームを採用。より操作しやすくなりました。



ダイヤル式ボリューム



シーソー式ボリューム

こんな聞こえの方におすすめです!

少し離れると大声でも
聞こえにくく…



適応難聴度
軽 中 高 重
50~90 dB HL

ECO
電池長寿命

つながるリモコン/リモコン	WH-B17C, B15C, B13C
おまかせシーンセレクト	WH-B17C, B15C
電池放電防止機能「くるポンプラス」	WH-B17C, B15C, B13C/A



耳かけタイプ
モデルB1シリーズ

使いやすさ

耳あなタイプ
機能

(P.22 参照)

※2
シーンセレクト機能

風切り音抑制(IWS)

強調
前方強調(環境適応型指向性)

環境騒音抑制

ピーピー音抑制(ハウリング抑制)

衝撃音抑制(AGC)

電池切れお知らせアラーム音

小さな音の強調

※3
メモリ切換え両耳連携

ラインナップ

18

騒がしい場面にも自動適応できる プレステージ	アクティブなスタイルにも合わせやすい ハイスペック	日常生活をカバーする スタンダード
チャンネル数 16ch	チャンネル数 12ch	チャンネル数 9ch
おまかせシーン 6	おまかせシーン 6	おまかせシーン —
メモリ数 4	メモリ数 4	メモリ数 3
メモリ切換え両耳連携 ○	メモリ切換え両耳連携 ○	メモリ切換え両耳連携 —
小さな音の強調 ○	小さな音の強調 ○	小さな音の強調 ○
環境騒音抑制 ○	環境騒音抑制 ○	環境騒音抑制 △
誘導コイル ○	誘導コイル ○	誘導コイル ○

WH-B17C

希望小売価格
388,000円 (電池付)

WH-B15C

希望小売価格
280,000円 (電池付)

WH-B13C

希望小売価格
180,000円 (電池付)

WH-B13A

つながるリモコン/リモコン非対応

希望小売価格
140,000円 (電池付)

ECO

電池1粒で約1ヶ月の長寿命

1粒(PR48)で約**300**時間^{※1}

長寿命だから環境にもお財布にもやさしい。

電池寿命(時間)

モデル B1シリーズ

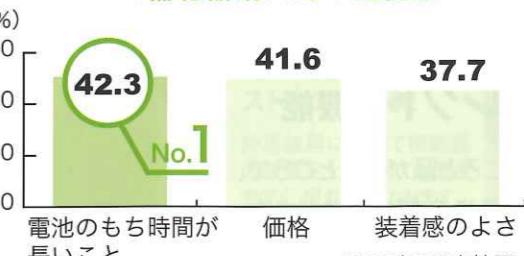
B17C/B15C/B13C PR48 約235時間

B13A

PR48 約300時間

補聴器を購入する際、重視されているのは
電池のもち時間が長いこと

<補聴器購入時の重視点>



●電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。

※1 モデルB1シリーズ B13Aの場合

※2、※3 WH-B13C/Aを除く

上記の補聴器は非課税です。上記補聴器の価格は本体1台の希望小売価格です。記載内容は2012年11月現在のものです。

1台で両耳装用 より自然な「聞こえ」

こんな方に
おすすめ

操作しやすいものがいい方に

音量の調節がしやすい 充電台に立てるスタンド充電方式

気軽に使えるものがいい方に

ステレオヘッドホン・スタイルだから耳につけやすく音の臨場感が違う

高度難聴の方に

高度難聴までカバーする高出力(WH-105JJのみ)



スタンダード
(通常の使用)
家族や友人との語らいがよりスムーズに



シアター
(テレビ・音楽)
臨場感がより際立つ

たとえば…
コンサート・映画館・劇場



パーティー
(騒がしい場所)
にぎやかな環境でも雑音を抑え、より快適に

たとえば…
パーティー・ショッピングモール・雑踏・電車内



インドア
(静かな場所)
静かな室内では言葉をより聞き取りやすく



外部
入力

テレビやミュージック・プレイヤーに直接つないで高音質を満喫

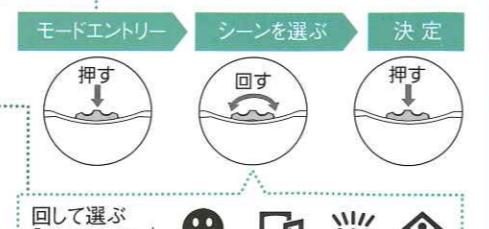
入力比の調節でAV機器の音も聞きながら、周囲の音も聞くことができます。

推奨品:ステレオミニプラグケーブル RP-CAM3G15(1.5 m)
モニター出力ケーブル RP-CAPM3G15(1.5 m)
抵抗無しタイプをご使用ください。



シーンにあった適音が選べる「シーンセレクト」機能

たとえば、静かなところと騒がしいところで、聞き取りやすい音量や音質は異なります。「シーンセレクト」機能では、4つのモードから聞こえの状況と環境にあった「適音」を選ぶことができます。また、手元の操作で音量の調節ができます。



お一人おひとりの聞こえの状況に合わせる音調整は販売店が行います。



経済的な充電タイプ

充電台に立てるスタンド充電方式。
電池の出し入れなどの手間なく、簡単に充電できます。



- 充電時間は約2時間30分です。充電完了後の電池寿命(時間)はWH-105JJ:約15時間/WH-103JJ:約16時間です。※1、※2
- 充電池が切れたときの緊急対応として、乾電池もお使いいただけます。
- 単4形×1本:パナソニック製アルカリ乾電池の場合の電池寿命(時間)はWH-105JJ:約15時間/WH-103JJ:約16時間です。※2



※1 専用の充電式電池(HHR-4AG)以外を使用した場合、付属の充電台では充電できません。
※2 電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。



ポケットタイプ

モデルJ1シリーズ

ステレオ「両耳装用」が、より自然な聞こえをかなえます。

ステレオで集音

両耳で集音するので、音の臨場感・方向感・騒音下の聞き分けがよりわかりやすい。

マイクロфонがイヤホンに内蔵されているため衣ずれの音を気にせず装用スタイルも自由に楽しめます。



ステレオで処理

左耳・右耳それぞれの聴力に合わせて音調整が可能※だからより快適に聞き取れる。

音を処理する部分
(イメージ)

※お一人おひとりの聞こえの状況に合わせる音調整は販売店が行います。



ステレオで聞く

両耳で聞く
4つのメリット

音の臨場感が違う



音を立体的にとらえることができ、より自然で臨場感豊かな世界が広がります。

騒音下でも会話しやすい



騒踏での会話、銀行や病院で呼ばれる時など、騒がしい場所でもより聞き取りやすくなります。

耳への負担、ストレスを低減



片耳装用に比べて補聴器の音量を上げなくても聞きやすくなり、疲れにくくなります。

車の接近もわかりやすい



音の方向感や距離感がつかみやすいので、車の接近などもわかりやすくなります。

使いやすさ

耳あなタイプ

RICタイプ

耳かけタイプ

ポケットタイプ

ボケットシリーズ

オプション

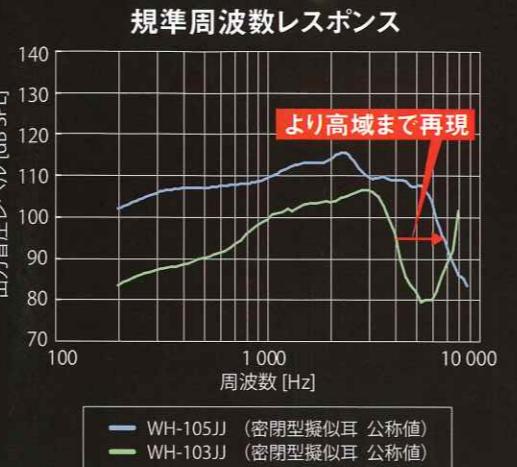
ラインナップ

気軽に使って高音質 ステレオヘッドホン・スタイル

いつも身につけたくなる音質と美しさ

幅広い音域で、 より鮮明な聞こえを実現

WH-105JJには子音の聞き取りや、音楽の聞こえに影響のある高域まで再現するバランスドアーマチュア(電磁型)レシーバを採用。さらにレシーバを2つ重ねて高出力化し、高度難聴の方にもお使いいただけます。



風切り音を抑え、 聞きたい音をキャッチ

新採用の後向きマイクロホンは、耳本来の集音効果により、マイクに音を集めるとともに前方からの不快な風切り音を抑えます。



気軽につけられ、 長時間でもより快適な装用感

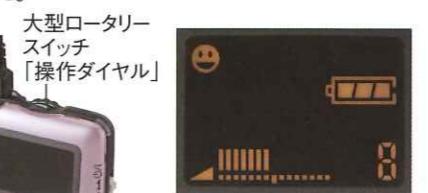
使用シーンに合わせて装用スタイルが選べるようデザイン。
ハンガー(着脱式)※1

常時装用やアクティブな行動時に、安定感を向上。
※1 オプション品



見やすい液晶、 使いやすいカタチ

オレンジ色のバックライトを採用。電池の残量も見やすく表示。大型ロータリースイッチ「操作ダイヤル」など、使いやすいデザインを目指しました。



よりクリアで高出力。高度難聴の方にもより適したモデル



チャンネル数
5ch ※2
希望小売価格
99,000円(充電池付)

適応難聴度
軽 中 高 重

50~85 dB HL

補聴器が初めての方にも使いやすいベーシックモデル



チャンネル数
3ch ※3
希望小売価格
79,000円(充電池付)

適応難聴度
軽 中 高 重

~70 dB HL

気軽に装用するモノラルイヤホン(片耳)もご使用いただけます。(P.27参照)

※2、※3 チャンネル数が多いほど細かく聞こえに合わせられます。

機能

- 機能
- 風切り音抑制 (IWS)
- 環境騒音抑制
- ピーピー音抑制 (ハウリング抑制)
- 衝撃音抑制
- 電池切れお知らせ アラーム音
- OK
- 1年間保証
- on/off
- 単四形乾電池
- 単三形乾電池



あなたのご要望にお応えする

デジタル/アナログ
シリーズ

使いやすさ

耳あなタイプ

RICタイプ

耳かけタイプ

ポケットタイプ

ポケナットグタイプ

オプション

ラインナップ

デジタル

レディメイド 耳あな型

こみみ 突然の大きな音も響きにくいデジタル式



WH-92AJ

カブチーノブラウン

希望小売価格

93,800円(電池付)

適応難聴度
軽 中 高 重
~55 dB HL

※1 固定方式

※1

2ch



※1

アナログシリーズ

耳かけ型

電池が大きく扱いやすいタイプ



WH-B500

希望小売価格

88,000円(電池付)

適応難聴度
軽 中 高 重
50~85 dB HL



適応難聴度

軽 中 高 重
~75 dB HL



WH-B400

希望小売価格

60,000円(電池付)

●WH-B500、B400は携帯電話やPHSと併用しないでください。

ポケット型

操作が分かりやすく手軽に使える



WH-2600

希望小売価格

68,000円(電池付)

適応難聴度
軽 中 高 重
70~100 dB HL



WH-2400

希望小売価格

53,000円(電池付)

適応難聴度
軽 中 高 重
50~90 dB HL



機能の説明 (デジタル)

風切り音抑制 (IWS)

耳障りな風切り音を自動で抑えます。

ピーピー音抑制 (ハウリング抑制)

不快なピーピー音を自動で抑えます。

衝撃音抑制 (AGC)

突然的な衝撃音を抑えます。

電池切れお知らせ アラーム音

電池の消耗を音でお知らせします。

メモリ切換え両耳連携

補聴器本体の操作でメモリを切換えると、もう片方の補聴器のメモリも自動で切換えます。

シーケンサ選択機能

使用環境に合わせて補聴器が音質設定を自動調節します。

メモリ切換えスイッチ

好みに合わせて設定を切換えることができます。

小さな音の強調

遠くの音や小さな音の聞き取りやすさの調整が可能です。

カッコ内は機能名を表します

電池

空気電池PR41を使用します。

空気電池PR48を使用します。

空気電池PR536を使用します。

空気電池PR44を使用します。

単四形乾電池を使用します。

単三形乾電池を使用します。

通常のご使用での自然故障に限り2年間無償で修理いたします。

通常のご使用での自然故障に限り1年間無償で修理いたします。

携帯電話が使えます。

上記の補聴器は非課税です。上記補聴器の価格は本体1台の希望小売価格です。記載内容は2012年11月現在のものです。

聞こえの目安

小声が聞こえにくい方に

軽
30~50 dB HL

普通の声の大きさが聞こえにくい方に

中
50~70 dB HL

少し離れると大声でも聞こえにくい方に

高
70~90 dB HL

耳元で大声でも聞こえにくい方に

重
90~120 dB HL

機能の説明 (アナログ)

音質調整 (N-L)

高い音が気になる場合に、高音域の音を抑えます。

MTB回路

誘導コイルの音と周囲で話す声との音のバランスを調整できます。

音質調整 (N-H)

低い音が気になる場合に、低音域の音を抑えます。

AIB回路

テレビケーブルなどからの音と、補聴器からの音のバランスを調整できます。

音量調整 (GAIN)

聴力に合わせて、適切な音量に調整します。

NAC回路

大きな音や衝撃音に早く反応し、ひづみ感の少ない、より自然な音に抑えます。

MT機能

誘導コイルの音と同時に周囲の音声も聞けます。

AGC回路

衝撃音をやわらげ、聞きやすい音量を保ちます。

選べるスイッチ

ボリュームスイッチ

音量調節+電源の入・切をおこないます。

On/Offスイッチ

電池のフタのスライドで電源の入・切をおこないます。

スライドOn/Offスイッチ

レバー式で電源の入・切をおこないます。

On/Offスイッチ

レバー式で電源の入・切をおこないます。

携帯電話をしたまま、

通常のご使用での自然故障に限り1年間無償で修理いたします。

<

大切な補聴器をずっと快適にご愛用いただくために。

補聴器に早く慣れるには、
ちょっとしたコツがあります。

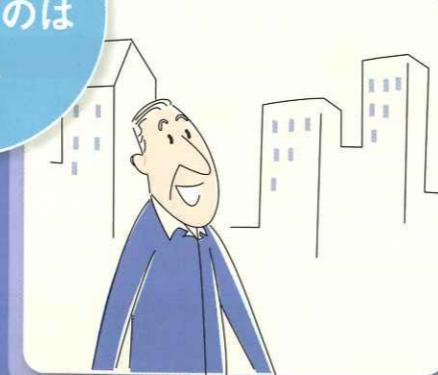
毎日疲れない程度(30分～1時間)で1ヶ月は使い続け、
慣れてきたら使う時間を増やしましょう。



ご購入後に**必要**なこと

音質調整やメンテナンスを積み重ねていくことにより、
お耳に合わせていきます。より快適に長くお使いいただき、「聞こえる歓び」をご堪能ください。

毎日使
って
いた
だ
く
の
は
も
ち
ろ
ん



ご家族の協力も大切です。

ご本人が補聴器を使いこなせるようになるまで、
あたたかな応援と協力を願います。
それがうれしい励みになります。



相手に注意を促し顔を見て話す

意思を伝えるのに、顔の表情や動作は
大切な役割を果たします。



ゆっくり、はっきり話す

聞き取りやすいように、
丁寧な話し方で接します。



普通の大きさの声で話す

補聴器が音を大きくするため、
大声はむしろ聞き取りにくく
なります。

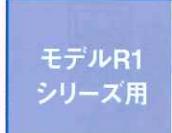
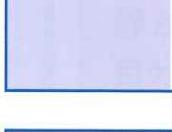
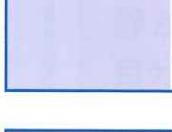
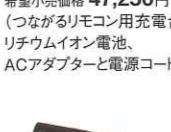
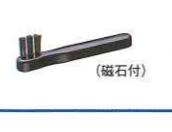
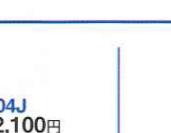
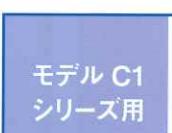
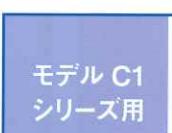
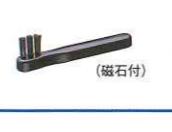
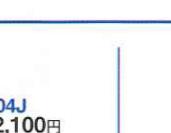
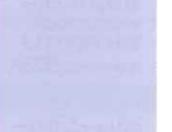
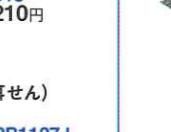
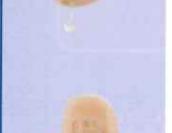
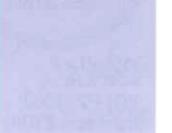
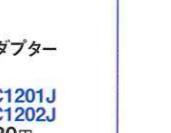
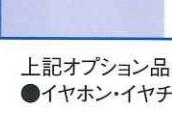
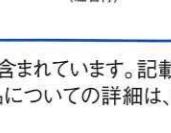
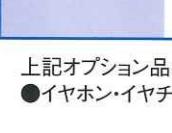
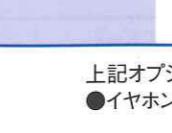
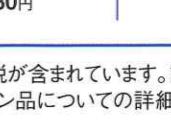
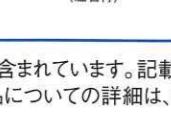
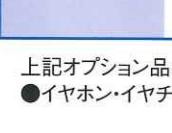
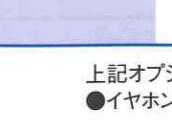
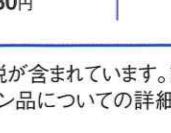
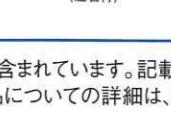
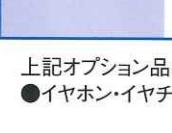
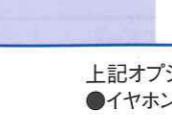
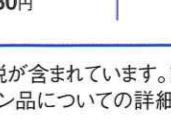
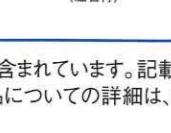
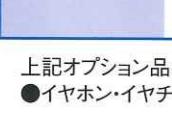
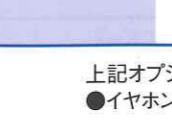
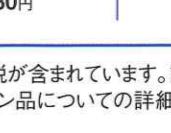
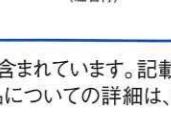
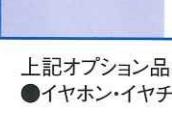
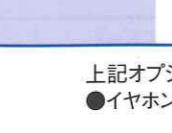
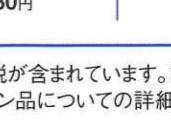
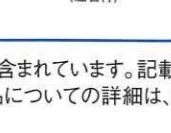
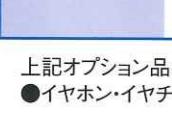
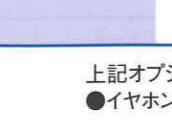
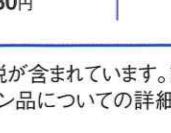
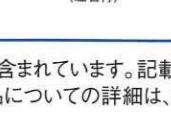
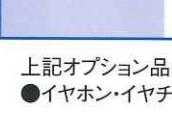
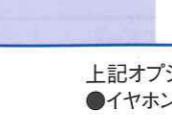
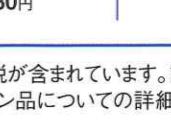
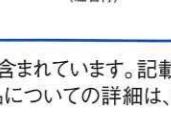
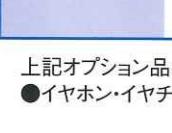
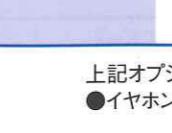
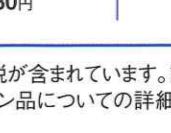
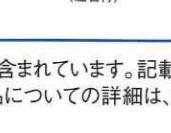
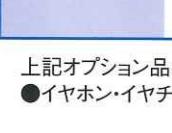
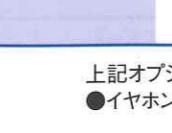
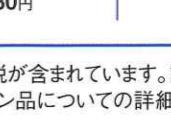
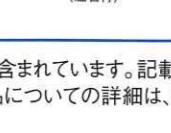
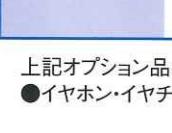
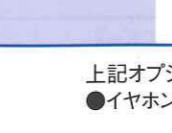
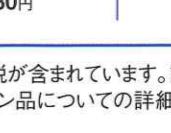
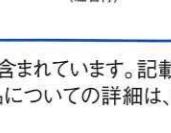
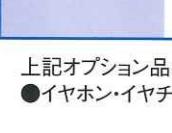
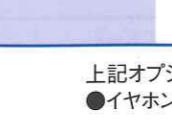
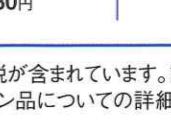
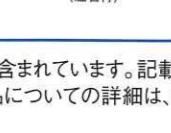
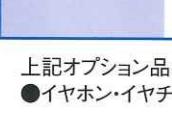
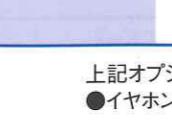
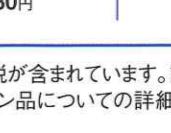
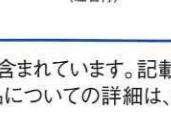
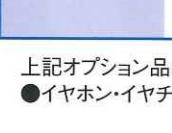
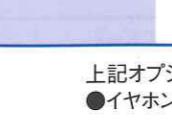
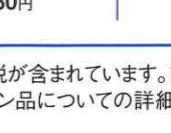
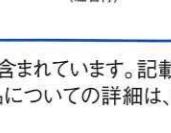
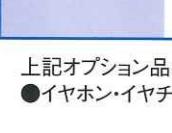
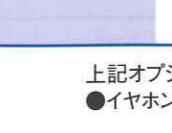
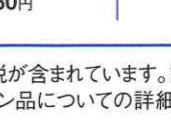
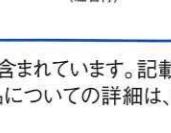
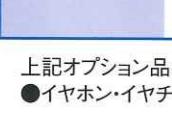
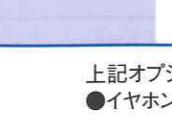
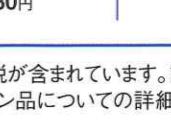
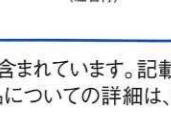
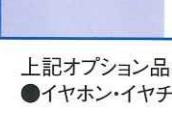
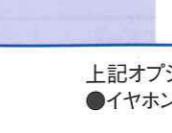
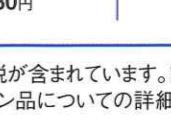
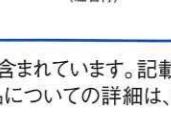
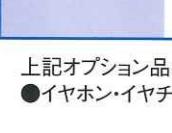
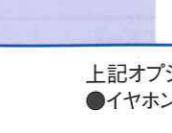


言い回しを いろいろ変えて話す

聞き取りにくい時は同じ言葉を
繰り返すより、言い方を変える
ほうが効果的です。



補聴器をより快適に、使い続けていただくために。

モデル R1 シリーズ用				モデル R1・B1 シリーズ共通 (WH-B13A を除く)	
					
					
					
					
					
モデル B1 シリーズ用				モデル R1・B1 シリーズ共通 (WH-B13A を除く)	
					
					
					
					
モデル C1 シリーズ用				モデル R1・B1 シリーズ共通 (WH-B13A を除く)	
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					<img alt="シリカゲル (乾燥剤) 1個

補聴器をより快適に、使い続けていただくために。

モデルJ1
シリーズ用



ポケット型用(モデルJ1シリーズを除く)



アナログ(耳かけ)



モデル
KJ/LJ/MJ
シリーズ用
(RIC)



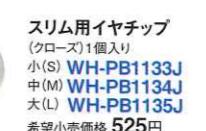
乾燥ケース
耳かけ型用(シリカゲル・スポンジ付)
WH-PG1203J
希望小売価格 2,100円

シリカゲル(乾燥剤)1個入り
WH-PZ1801J
希望小売価格 210円

乾燥ケース用スポンジ
(耳かけ型用)
WH-PG1402J
希望小売価格 210円

キャリングケース 1個入り
WH-PG1312J
希望小売価格 2,100円

モデル
KJ/LJ/MJ
シリーズ用
(耳かけ)



チューブ
70cm:1本入り
WH-PG1200J
希望小売価格 210円

イヤチップホルダー
WH-PC1100J
希望小売価格 315円

カラーリング
赤2個、青2個入り
WH-PZ1200J
希望小売価格 210円

乾燥ケース
耳かけ型用(シリカゲル・スポンジ付)
WH-PG1203J
希望小売価格 2,100円

シリカゲル(乾燥剤)1個入り
WH-PZ1801J
希望小売価格 210円

乾燥ケース用スポンジ
(耳かけ型用)
WH-PG1402J
希望小売価格 210円

キャリングケース
モデルKJ/LJ/MJ用
WH-PG1309J
希望小売価格 2,100円

アクセサリー
ストラップ

補聴器用ストラップ
PHI-TE1
希望小売価格 2,800円

●「ちょっと使って」「ちょっと外して」という使い方に便利

●不意の落下紛失を防止

●3つの使い方ができます。(下の写真参照)



耳かけ型用
ポケット型用(モデルJJを除く)

携帯電話用アクセサリー
PHI-BP1
希望小売価格 7,350円

説明:コイル付き耳かけ型補聴器と併用することで携帯電話がより快適に使用できます。

イヤモールド(オーダーメイド耳せん)

耳かけ型用
ポケット型用(モデルJJを除く)

パナソニック イヤモールドセンター
〒604-8155 京都市中京区錦小路通烏丸西入 ヤマチユビル1F
TEL.075-251-1564 FAX.075-251-1563

モデルR1シリーズ用
パナソニック補聴器株式会社
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地
TEL.045-939-1835

あなたにより適した補聴器が、きっとみつかります。

タイプ	シリーズ	品番	希望小売価格	使いやすさ					スペック					同梱物※2	販売名	一般的な名称	医療機器認証番号						
				別売ワイヤレスオプション対応(つながるリモコン・リモコン・AV送信機)	電池保管・交換ツール「くるポン」	撥水	チャンネル数	シーンセレクト数	メモリ数	適応難聴度	使用電池	電池寿命(時間)	最大音響利得(dB)	90dB最大出力音圧レベル(dB SPL)[ピーク値]	誘導コイル入力の最大感度[dB][標準周波数]								
耳かけタイプ	モデルR1シリーズ	RIC	WH-R17D	365,000円 (-X,-Z,-Uの場合375,000円)	○	同梱	○	16	おまかせシーン6	4	PR48	約250	60★	134以下	-	・かんたんガイド ・乾燥ケース(乾燥剤入り) ・イヤチップ ・イヤチップソーター ・イヤホンユニット ・キャリングケース(ブラシ入り) ・耳あかガード(販売店でお預かりします) ・イヤホンユニット用耳あかガード交換ツール(販売店でお預かりします) ・電池保管・交換ツール「くるポン」	おんわR1-W	デジタル式補聴器	223AIBZX00005000				
			WH-R17C	355,000円 (-X,-Z,-Uの場合365,000円)								約300	50★	125以下	-								
			WH-R15D	285,000円 (-X,-Z,-Uの場合295,000円)								約250	60★	134以下	-								
			WH-R15C	275,000円 (-X,-Z,-Uの場合285,000円)								約300	50★	125以下	-								
			WH-R13D	185,000円 (-X,-Z,-Uの場合195,000円)								約250	60★	134以下	-								
			WH-R13C	175,000円 (-X,-Z,-Uの場合185,000円)								約300	50★	125以下	-								
モデルB1シリーズ	BTE	WH-B17C	388,000円	○	○	「くるポンプラス」として機能内蔵	○	16	おまかせシーン6	4	PR48	約235	70★	140以下	96	・かんたんガイド ・乾燥ケース(乾燥剤入り) ・イヤチップ ・キャリングケース ・イヤチップホルダー ・カラーリング(赤・青) ・チューブ	おんわB1	耳かけ型補聴器	224AIBZX00002000				
			WH-B15C																				
			WH-B13C																				
			WH-B13A																				
デジタル	モデルC1シリーズ(オーダーメイド)	CIC(ミニ)	WH-M17A	370,000円	-	-	-	16	おまかせシーン6	-	PR536	約135	47★	129以下	-	・かんたんガイド ・乾燥ケース(乾燥剤入り) ・キャリングケース	おんわC1	耳あな型補聴器	224AIBZX00004000				
			WH-M15A	260,000円	-	-	○	12	おまかせシーン6	-	PR41/PR48	約230/約390	55★	129以下	-								
			WH-M13A	180,000円	-	-	-	9	-	-													
	ITC(カナル)	WH-C17A	370,000円	-	-	-	○	16	おまかせシーン6	4※1	PR41/PR48	約230/約390	55★	129以下	-	・耳あかガード[交換用](販売店でお預かりします) ・ドライバー ・掃除用ブラシ ・ペントチップ※3 ・耳あかガード交換ツール ・巾着袋	おんわC1	耳あな型補聴器	224AIBZX00004000				
			WH-C15A	260,000円	-	-	○	12	おまかせシーン6	4※1													
			WH-C13A	180,000円	-	-	-	9	-	3※1													
	ITE(コンチャ)	WH-F17A	370,000円	-	-	-	○	16	おまかせシーン6	4※1	PR48	約325	65★	135以下	-	※3 CIC(ミニ)およびペントチップ無し仕様には付属しません。	おんわC1	耳あな型補聴器	224AIBZX00004000				
			WH-F15A	260,000円	-	-	○	12	おまかせシーン6	4※1													
			WH-F13A	190,000円	-	-	-	9	-	3※1													
モデルJ1シリーズ	こみみ(レディメイド)	WH-92AJ	93,800円	-	-	-	-	2	-	-	PR41	約170	35★	125以下	-	・イヤチップアダプター・イヤチップ ・バイオチップ・イヤチップフィルター ・スponジフィルター(販売店でお預かりします) ・掃除用ブラシ・キャリングケース	補聴器こみみ	耳あな型補聴器	217AIBZX00004000				
			WH-105JJ	99,000円	-	-	-	5	両耳	手動シーン4	-	PR41/PR48	約15/約15	65★	137以下	-	・単4形ニッケル水素充電式電池 ・イヤチップ・イヤチップ(オープン)※4 ・イヤチップ(ダブルドーム)※5 ・イヤチップソーター※5・イヤチップアダプター※5 ・マイク付イヤホン・電源コード・ACアダプター ・充電台・ストラップ・フィルター※4・キャリングケース ※4 WH-103JJのみ ※5 WH-105JJのみ	おんわWH-105JJ	ポケット型補聴器	223AIBZX00011000			
アナログ	耳かけタイプ	WH-B500	88,000円	-	-	-	-	-	-	-	PR44	約650	65	143以下	-	・イヤチップ・イヤチップホルダー ・チューブ ・風防(ボリュームカバー付) ・化粧ケース	補聴器WH-B500	耳かけ型補聴器	21900BZX00112000				
			WH-B400	60,000円	-	-	-	-	-	-	PR44	約800	58	138以下	-	・イヤチップ・イヤホンコード ・耳だれ防止フィルター ・クリップ・レザーケース・化粧ケース	補聴器WH-B400	耳かけ型補聴器	21900BZX00111000				
	ポケットタイプ	WH-2600	68,000円	-	-	-	-	-	-	-	PR44	約110/約240(P-P)	85★	154以下	122	・イヤチップ・イヤチップアダプター ・イヤホンコード ・耳だれ防止フィルター ・クリップ・レザーケース・化粧ケース	補聴器WH-2600	ポケット型補聴器	21900BZX00107000				
			WH-2400	53,000円	-	-	-	-	-	-	PR44	約115/約260(P-P)	65	140以下	103	・イヤチップ・イヤホンコード ・耳だれ防止フィルター ・クリップ・レザーケース・化粧ケース	補聴器WH-2400	ポケット型補聴器	21900BZX00106000				

・電池寿命は、電池の種類や使用条件または補聴器の設定によって変わります。・電池寿命で(P-P)印のついている機種は、高出力ブッシュフル回路を採用しています。

※1 メモリ切換スイッチを選択した場合

29 上記の補聴器は非課税です。上記補聴器の価格は本体1台の希望小売価格です。記載内容は2012年11月現在のものです。

・最大音響利得で★印のついている機種は、入力50 dB SPLでの数値です。・同梱物については、予告なしで変更する場合があります。

日本工業規格JIS C5512:2000に基づいて測定、表示しております。

詳細は各商品ページをご覧ください。